

Medisorb®


NATRONOVÉ VÁPNO

Bezpečná a efektivní absorpce CO₂ pro přístroje GE Healthcare Medisorb® nabízí efektivitu nákladů s optimálním výkonem.

Je optimální řešení pro celosvětově rostoucí trend použití low-flow anestezie.

Vlastnosti

- Unikátně vysoká absorpční kapacita CO₂, zřetelná změna barvy přesně ukazuje množství dostupného absorbentu
- Vysoká tvrdost granulí (nad úroveň 99% dle USPXXII) garantuje minimální obsah prachu (méně jak 0,2%). Tyto vlastnosti jsou základem prevence kontaminace dýchacího okruhu a vysoké efektivity absorpce CO₂.
- V souladu s doporučeními APSF (Anesthesia Patient Safety Foundation) Medisorb významně nedegraduje těkavá anestetika (při použití, jak je popsáno v návodu k použití).
- Předplněné (jednorázové) náplně jsou bezpečně a vzduchotěsně uzavřeny a zajišťují bezpečnější způsob výměny a udržení absorbentu.

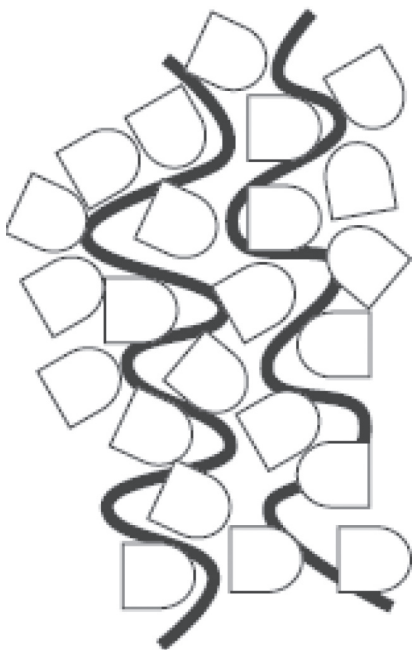

- Speciální D-profil granulí zefektivňuje absorpci, poskytuje větší kontakt, tedy dochází k využití kapacity celé granule



objednáací číslo	produkt	popis produktu	množství
8003138		Jednorázové, pro anesteziologické přístroje Avance®, Aespire® a Aisys®; z bílé do růžové	6 ks/balení
2079796-001		Jednorázové, pro anesteziologické přístroje CS650, z bílé do fialové	6 ks/balení
8570043		Vápno sypací, Twinpack, z bílé do růžové	2x 4,5 kg
1407-7004-000		Kanystř CO2 na opakované použití pro Avance®, Aespire® a Aisys®	1 ks
2071165-001-S		Kanystř CO2 na opakované použití pro CS620 / 650	1 ks
2105489-001		Pěnový filtr k anesteziologickému vápnu	1 ks